
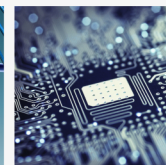
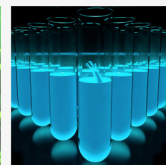
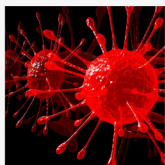
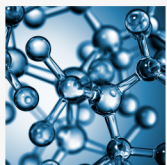


Vacuum pump Service Provider

SCISPEC ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ

ทั้งเครื่อง GC GCMS LC LCMS AAS ICP และ ICPMS ของ " THERMO SCIENTIFIC " SCISPEC พร้อมให้คำปรึกษาด้าน Application


และให้บริการด้าน Service โดยทีมงานวิศวกรที่ผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง และมีประสบการณ์ในการทำงานสูง

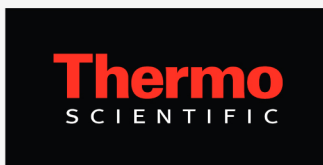

▶ E2M28

▶ EDWARDS VACUUM PUMP SERIES

- ▶ RV Series : RV3 RV5 RV8 RV12
- ▶ E2M Series : E2M28 E2M30

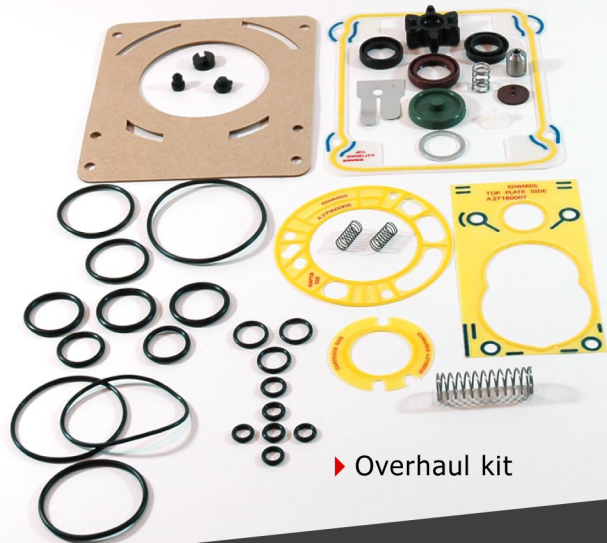

▶ Overhaul kit

นอกจากนี้ทีมงานของเราสามารถให้บริการ " VACUUM PUMP " ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญหลัก ที่ส่งผลโดยตรงต่อความถูกต้องแม่นยำของผลการวิเคราะห์ของเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ



SCISPEC สามารถให้บริการ Vacuum pump ของ " EDWARDS " โดยเราพร้อมให้บริการ

- ▶ Overhaul : ทำความสะอาดเครื่องตามระยะเวลา พร้อมเปลี่ยน Vacuum Pump Oil, Overhaul Kit, Blades
- ▶ Exchange : รับแลกเปลี่ยนเครื่อง Vacuum pump ที่เสื่อมสภาพ กับ Vacuum pump ที่สามารถใช้งานได้ทันที
- ▶ Trade in : ซื้อเครื่อง Vacuum pump ใหม่ในราคาพิเศษ เพียงนำ Vacuum pump เก่ามาแลก




▶ RV3

Vacuum pump Service Provider

Performance optimisation through regular maintenance


SciSpec พร้อมให้บริการซ่อมและบำรุงรักษา Vacuum pump ด้วยอะไหล่แท้จาก EDWARD ทั้งน้ำมัน Ultra grade, O-ring, Filter, Seal Kit, Blade เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจถึงคุณภาพของงานซ่อม และนอกจากนี้ Scispec ยังมีบริการพิเศษโดย

- ▶ มี Vacuum pump สำรอง ให้ใช้ระหว่างส่งเข้ารับบริการ
- ▶ Service warranty รับประกันงานบริการ 6 เดือน

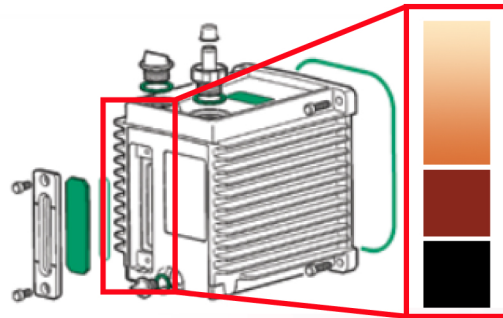

- ▶ Monitor and plan to maintenance
- ▶ Change oil immediately
- ▶ Discontinue operation Overhaul pump

▶ Oil condition

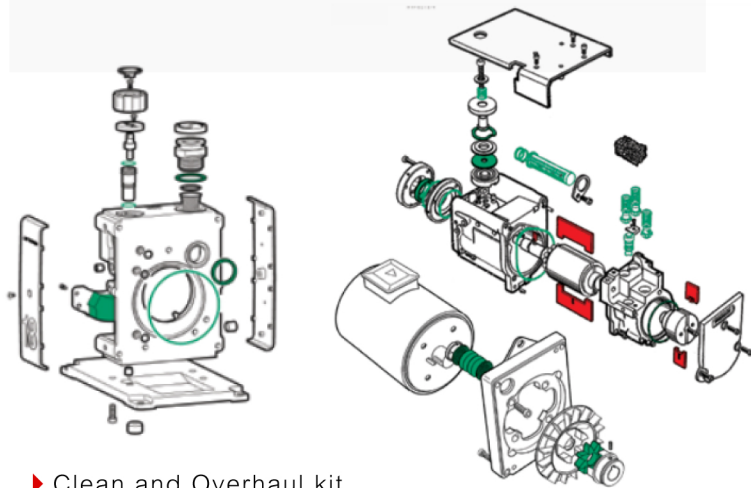


▶ Clean and Overhaul kit



Maintenance Schedule Interval	every 3,000 hrs/ 4 months	every 15,000 hrs/ 20 months	every 30,000 hrs/ 40 months
Maintenance require	Oil change	Clean and Overhaul	Blade Kit Replace
RV3	H11025015	A65201131	A65201130
RV5	H11025015	A65201131	A65301130
RV8	H11025015	A65201131	A65401130
RV12	H11025015	A65201131	A65501130
E2M28	H11025015	A37301131	A37301135
E2M30	H11025015	A37301131	A37301135



Vacuum Science Product Solution

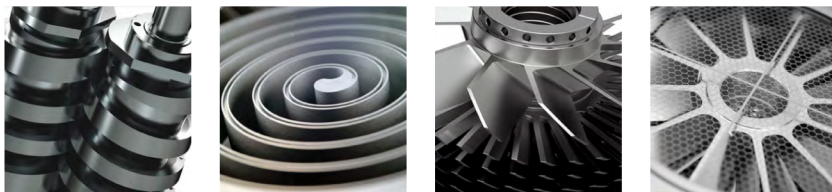

▶ Blade Kit



SciSpec Co., Ltd.
 10 Kanchanapisek Road, Soi 0010 2nd Junction,
 Bangkae, Bangkok 10160 Thailand
 Tel. +66(0) 2454 8533-4
 Fax. +66(0) 2454 8535
 e-mail : info@scispec.co.th
 website : www.scispec.co.th

